

Instrument console covers/castings & Touch panel assemblies, Over patient


30021446 Aluminium console cover assembly with 2nd gen Touch panel, OP

30012799 CP4.5 Display Assembly for Compact i


10034389 CP4 Micro SD
memory card - programmed



Screw M4x6 DIN 912

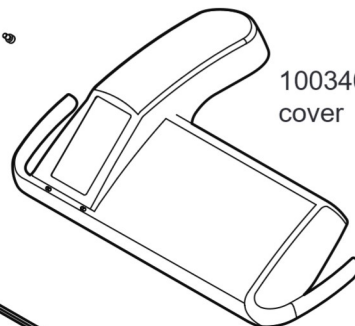

10034085 OP Aluminium console
cover

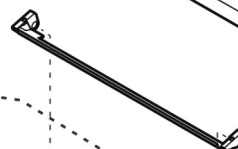

10027576 Hinge plate

10027810 Hinge axis

02523631 Hinge pivot

02523641 Washer

M4x8 DIN 912

M4x8 DIN 912

M4x6 DIN 912

M4x6 DIN 7991

10030851 Control connector PCB

30004531 Refurbished control connector PCB 10030851



Screw M4x6 DIN 7984

Screw M4x6 DIN 7984

10006989 Earthing cable

Washer M4 DIN 6798

10032436 Mask plate

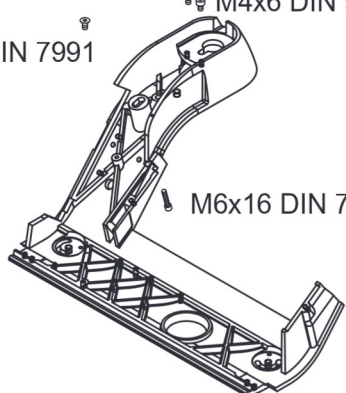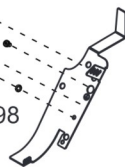

M6x16 DIN 7984

10032464 Console casting

10027876 Earthing cable



10029205 Planmeca Compact i Touch
software upgrade kit



0001490 Cable tie (2 pcs)

30016100 Hygiene membrane



Używanie panelu dotykowego jako klawiatury



Naciśnij **ABC**, aby otworzyć klawiaturę na panelu dotykowym.

Wyświetla się alfanumeryczna klawiatura do wpisywania tekstu w pole tekstowe na monitorze lub na tablecie.

Użyj strzałek w górnym rzędzie do poruszania się w górę / w dół, lewo / prawo tekstu.

Symbole poniżej strzałek w górnym rzędzie mogą być używane takie jakie są lub jako skróty do liter zawierających dany symbol. Np. naciśnięcie ^ na około sekundę, powoduje wyświetlenie się liter ze znakiem ^. Automatyczny powrót do trybu zwykłego po wpisaniu dowolnej litery lub ponownym naciśnięciu symbolu.

Aby wyświetlić znaki specjalne naciśnij **Alt**. Kolejne naciśnięcie **Alt** powoduje powrót do trybu zwykłego.


12.2 Panel sterowania na uchwycie Flexy

Panel sterowania na uchwycie Flexy jest używany do sterowania unitem i fotelem.

Funkcje przycisków **Flexy** mogą być zaprogramowane przez serwis techniczny. W zależności od rodzaju zaprogramowanej funkcji, po naciśnięciu przycisku **Flexy**, można wykonać:

- wybrać tryb zagłówka (zwykły lub pochylony) w zagłówku mechanicznym
- uruchomić / wyłączyć kamerę wewnętrzną
- przestawić fotel w pozycję spluwaczkową (domyślna)
- zablokować / odblokować panel dotykowy
- włączyć / wyłączyć ssanie
- włączyć tryb kompozyt na łamie pola pracy (krótkie naciśnięcie) lub wyregulować natężenie (długie naciśnięcie)

O dodatkowe informacje poproś dystrybutora Planmeca.

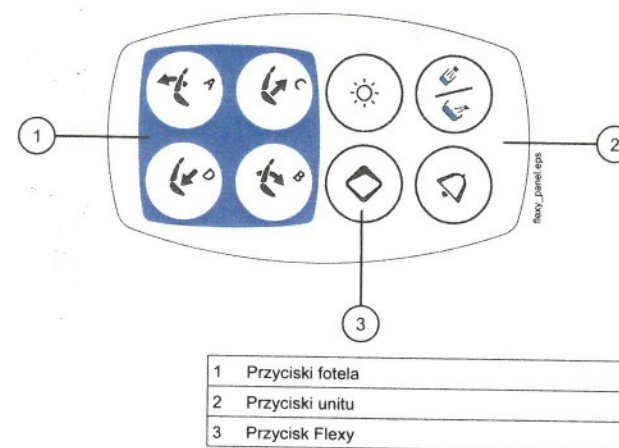

Panel sterowania znajduje się na konsoli instrumentów, posiada ekran dotykowy i można go używać do sterowania pracą i do programowania instrumentów, unitu i fotela. Dodatkowo z panelu dotykowego uruchamia się procedury konserwacji.

Sterowanie panelem dokonuje się poprzez dotykanie go palcem lub miękkim rysikiem. W rękawiczkach medycznych można sterować panelem, ale czasami niektóre rękawiczki to uniemożliwiają.

Na panelu wyświetlane są informacje dotyczące aktualnych czynności, które się zmieniają wraz z postępem zabiegu.

Niektóre przyciski mają wskaźniki, które pokazują status poszczególnych funkcji. Gdy wskaźnik jest zapalony to oznacza, że funkcja została uruchomiona.

Kiedy unit jest w trybie programowania przycisk **Program** jest niebieski.

Można ustawić elementy na głównym wyświetlaczu zgodnie z preferencjami, patrz punkt 25.2 "Porządkowanie elementów na panelu sterowania" na stronie 135.

Panel dotykowy jest dostępny w kilku wersjach językowych i wybór języka jest dokonywany na panelu dotykowym. Więcej informacji w punkcie 22.1 "Język" na stronie 103.

W trybie programowania na wyświetlaczu pokazane są parametry do zmiany, patrz rozdział 25 "PROGRAMOWANIE" na stronie 134.

W trybie programowania zablokowana lub niewybrana funkcja ma kolor szary. Aby odblokować lub wybrać funkcję naciśnij szary przycisk, który zmieni kolor na niebieski. Niebieski przycisk oznacza, że funkcja jest aktywna lub wybrana.

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania na wyświetlaczu pokazują się komunikaty błędów i pomocy, patrz rozdział 32 "KOMUNIKATY POMOCY I BŁĘDÓW" na stronie 200.



12.1.2 Funkcjonalność Touchpad



Panel dotykowy może być używany jako touchpad. Naciśnij przycisk **Touchpad** na panelu dotykowym, aby otworzyć widok touchpad.

Widok touchpad udostępnia wszystkie funkcjonalności myszy i klawiatury, zewnętrzna klawiatura i mysz nie są potrzebne.

UWAGA

Funkcja Touchpad wymaga podłączenia do unitu programu Planmeca Romexis w wersji 4.1 lub późniejszej. Jeśli nie ma połączenia z Planmeca Romexis, funkcja jest nieaktywna i przycisk Touchpad jest szary.


Używanie panelu dotykowego jako myszy komputera



Naciśnij **Touchpad**, aby otworzyć widok myszy na panelu dotykowym.

Przesuń swój palec po panelu dotykowym, aby przesunąć kursor po monitorze lub ekranie tabletu. Przewiń listę lub tekst pokrętle w prawo i użyj przycisków na dole tak, jak używa się prawego i lewego przycisku myszy.

Krótkie naciśnięcie prawego i lewego przycisku naciska na punkt na ekranie. Kiedy przycisk jest naciskany dłużej, przycisk pozostaje aktywny do czasu ponownego naciśnięcia na niego. Aktywny przycisk jest niebieski.

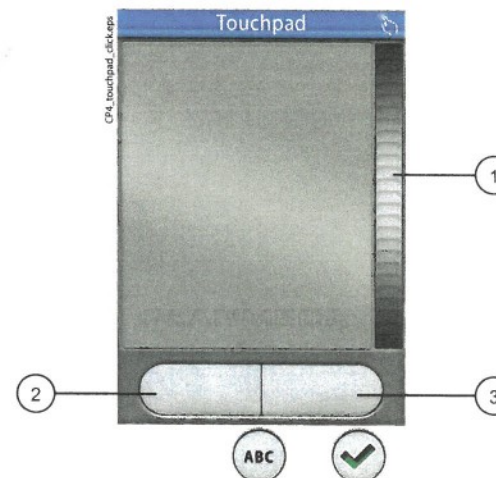

1	Pokrętle
2	Lewy przycisk
3	Prawy przycisk

Kiedy chcesz opuścić widok touchpad naciśnij **OK**.


Przykład: Przeciągnij i upuść

Użyj palca, aby przeciągnąć na ekranie kursor nad element, który chcesz przeciągnąć. Kiedy kursor znajdzie się nad elementem naciśnij na chwilę lewy przycisk, aby go aktywować. Przycisk zmienia kolor na niebieski. Przeciągnij palcem po panelu element w nowe miejsce. Naciśnij lewy przycisk, aby go zwolnić (przycisk staje się szary).

12 PANEL STEROWANIA

12.1 Panel sterowania na konsoli instrumentów

12.1.1 Panel dotykowy

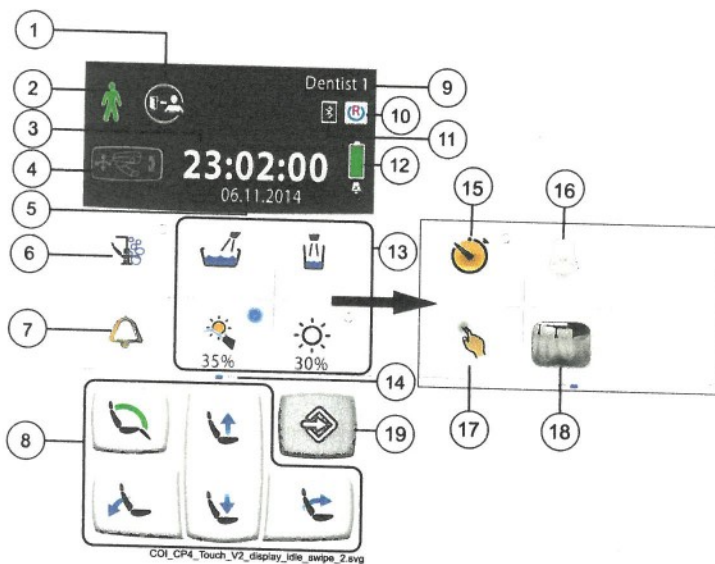

1 Przycisk wylogowania	11 Aktywny bluetooth (opcja, tylko wyświetlane)
2 Rozpoznawanie pacjenta (tylko wyświetlane)	12 Bateria bezprzewodowego sterownika nożnego (opcja, tylko wyświetlane)
3 Godzina (tylko wyświetlane)	13 Przyciski unitu
4 Tryb zagiówka mechanicznego (opcja, tylko wyświetlane)	14 Widok do przeciągania Przeciągnij na bok, aby zobaczyć więcej funkcji
5 Data (jeśli skonfigurowana, tylko wyświetlane)	15 Przycisk sekundnika
6 Przycisk serwisowy	16 Przycisk bezprzewodowego sterownika nożnego (opcja)
7 Wezwanie asysty / Otwarcie drzwi	17 Przycisk panelu dotykowego (opcja)
8 Przyciski fotela	18 Przycisk negatoskop
9 Nazwisko użytkownika (tylko wyświetlane)	19 Przycisk program
10 Romexis connection (optional, display only)	